

CARPOFIX MANU

Orteza unieruchamiająca nadgarstek

Ref. SRT 203

Zalecenia

Zaleca się stosowanie ortezy po skręceniach, niestabilności obszaru nadgarstka, przy zespole cieśni nadgarstka, chorobach reumatycznych i zwyrodnieniowych, w porażeniu nerwu promieniowego, zapaleniu pochewek ścięgniastych, po zdjęciu opatrunku gipsowego, w procesach doleczenia ortopedycznego i rehabilitacji.

Opis

Tutor wykonany jest z przewiewnego materiału laminowanego i zawiera:

- 1 metalową, profilowaną anatomicznie szynę dłoniową.
- 2 półelastyczne, tworzywowe stalki w części grzbietowej dłoni, zapięcie na velcro na grzbiecie dłoni.

Długość ortezy - 24 cm.

Orteza stabilizuje i unieruchamia staw promieniowo-nadgarstkowy.

Materiały konstrukcyjne


Orteza wykonana jest z trzywarstwowego laminowanego materiału:

- **Asterix** – to warstwa z włókien poliamidowych, które mają wysoki opór wchłaniania substancji chemicznych i biologicznych, wysoką odporność na ścieranie oraz brak właściwości do absorpcji wody.
- **Moltopren (MTP)** – to otwartokomórkowy materiał piankowy, przepuszczający powietrze w obu kierunkach, (przepuszczalność jest odwrotnie proporcjonalna do gęstości) o wysokich właściwościach absorpcyjnych wilgoci.
- **Jersey cottone SOFT** – to warstwa w 100% bawełniana lub bawełna ze spandexem – elastanem (dla zwiększenia elastyczności).


SOFT - nazwa wersji wykonanej z materiału oferującego właściwości ochronne dla skóry, które gwarantują delikatność w kontakcie z ciałem i zapobiegają powstawaniu podrażnień.

Właściwości tkaniny

Trójwarstwowa tkanina laminowana zachowuje się jak regulator wilgotności: bawełniana warstwa pochłania wilgoć z powierzchni ciała i przenosi ją w głąb tkaniny i przez piankę PU na zewnątrz.

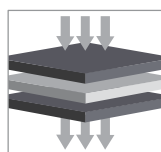

Przepuszczalny dla powietrza

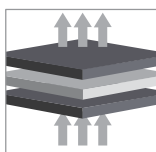

Przepuszczalny dla wilgoci



- Dodatkowe stalki tworzywowe.
- Zapięcie i regulacja na velcro.




- Metalowa, profilowana anatomicznie szyna dłoniowa (możliwa ręczna korekta profilu).

NFZ: J.02.01 Orteza na rękę i przedramię

Dostępne rozmiary, wersja lewa i prawa

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód nadgarstka (cm)	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25
Ref.	SRT203M1	SRT203M2	SRT203M3	SRT203M4	SRT203M5

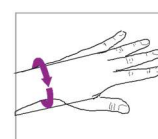

Po podaniu numeru **Ref.** należy dodać wersję – **L lewa, R prawa**.

Mierzmy obwód nadgarstka.