

TRIACARP M FINGER

Orteza unieruchamiająca nadgarstek i kciuk

Ref. SRT 213

Zalecenia

Produkt zalecany w przypadku urazów i dysfunkcji obszaru nadgarstka i kciuka, skręceń, zmian zwyrodnieniowych, zespołu cieśni nadgarstka, porażeniach nerwu promieniowego, zapaleniach pochewek ścięgniętych, w doleczaniu po złamaniach, w stanach po zabiegach operacyjnych i w procesie usprawniania.

Opis

Otwarty tutor wykonany jest z przewiewnego materiału zawiera:

- 1 metalową szynę dłoniową (profilowaną anatomicznie).
- 1 metalową szynę promieniową obejmującą kciuk (profilowaną anatomicznie).
- Dodatkową okolonadgarstkową taśmę stabilizującą.

Produkt jest półsztywną ortezą, która stabilizuje i unieruchamia staw nadgarstkowo-promieniowy, ogranicza zgięcie grzbietowe i dłoniowe.

Dodatkowo obejmuje kciuk, stabilizując stawy tego palca i obszaru promieniowego ręki. Możliwe ręczne korygowanie profilu szyn. Zapięcie i regulacja na velcro. System zapięcia umożliwia precyzyjną regulację siły stabilizacji i kompresji.

Długość ortezy: 23 cm.

Materiały konstrukcyjne


Orteza wykonana jest z trzywarstwowego laminowanego materiału:

- **Asterix** – to warstwa z włókien poliamidowych, które mają wysoki opór wchłaniania substancji chemicznych i biologicznych, wysoką odporność na ścieranie oraz brak właściwości do absorpcji wody.
- **Moltopren (MTP)** – to otwartokomórkowy materiał piankowy, przepuszczający powietrze w obu kierunkach, (przepuszczalność jest odwrotnie proporcjonalna do gęstości) o wysokich właściwościach absorpcyjnych wilgoci.
- **Jersey cottone SOFT** – to warstwa w 100% bawełniana lub bawełna ze spandexem – elastanem (dla zwiększenia elastyczności).


SOFT - nazwa wersji wykonanej z materiału oferującego właściwości ochronne dla skóry, które gwarantują delikatność w kontakcie z ciałem i zapobiegają powstawaniu podrażnień.

Właściwości tkaniny

Trójwarstwowa tkanina laminowana zachowuje się jak regulator wilgotności: bawełniana warstwa pochłania wilgoć z powierzchni ciała i przenosi ją w głąb tkaniny i przez piankę PU na zewnątrz.

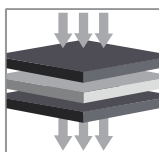

Przepuszczalny dla powietrza

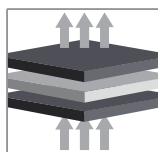

Przepuszczalny dla wilgoci



- Dodatkowa okolonadgarstkowa taśma stabilizująca.

- Zapięcie i regulacja na velcro.




- Metalowa, profilowana anatomicznie szyna dłoniowa.

- Metalowa, profilowana anatomicznie szyna promieniowa obejmująca kciuk.

NFZ: J.02.01 Orteza na rękę i przedramię

Dostępne rozmiary, wersja lewa i prawa

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód nadgarstka (cm)	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25
Ref.	SRT213M1	SRT213M2	SRT213M3	SRT213M4	SRT213M5

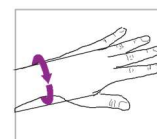

Po podaniu numeru **Ref.** należy dodać wersję – **L lewa, P prawa**.

Mierzymy obwód nadgarstka.