

AEROTEC UNO

Orteza unieruchamiająca kciuk

Ref. SRT 226

Zalecenia

Produkt zalecany w przypadkach niestabilności, zwichnięć lub doleczeniu po złamaniach kciuka, stanów zapalnych i przeciążeniach, w chorobach reumatycznych i artrozach tego obszaru, jako stabilizacja po interwencji chirurgicznej, w procesie rehabilitacji.

Opis

Orteza wykonana jest ze sztywnego, nierozciągliwego materiału, dodatkowo wzmocnionego wyprofilowaną anatomicznie 14 centymetrową szyną aluminiową. Zapięcie i regulacja na velcro.

Długość - 17 cm.

Produkt jest półsztywnym, unieruchamiającym stabilizatorem, który ujęmuje staw nadgarstkowo-śródręczny i śródręczno-paliczkowy kciuka.

Materiały konstrukcyjne


Orteza wykonana jest z trzywarstwowego laminowanego materiału:

- **Spaziato** – to przestrzenna siatka 3D o charakterystycznym kształcie, takim jak struktura plastra miodu z poliestrową nicią. Dzięki takiemu rozwiązaniu materiał zapewnia przepuszczalność w obu kierunkach dla ciepła i wilgoci.
- **Moltopren (MTP)** - to otwartokomórkowy materiał piankowy, przepuszczający powietrze w obu kierunkach, (przepuszczalność jest odwrotnie proporcjonalna do gęstości) o wysokich właściwościach absorpcyjnych wilgoci
- **Jersey cottone SOFT** – warstwa wykonana w 100% z bawełny lub bawełny ze spandexem – elastanem (dla zwiększenia elastyczności).


SOFT - nazwa wersji wykonanej z materiału oferującego właściwości ochronne dla skóry, która gwarantuje delikatność w kontakcie z ciałem i zapobiegają powstawaniu podrażnień skóry.

Właściwości tkaniny

Trójwarstwowa tkanina laminowana zachowuje się jak regulator wilgotności: bawełniana warstwa pochłania wilgoć z powierzchni ciała i przenosi ją w głąb.

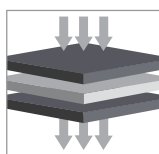

Przepuszczalny dla powietrza

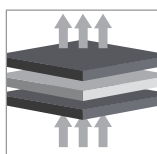


Przepuszczalny dla wilgoci



- Zapięcie i regulacja na velcro



- Metalowa szyna wyprofilowana anatomicznie (możliwe ręczne korygowanie).

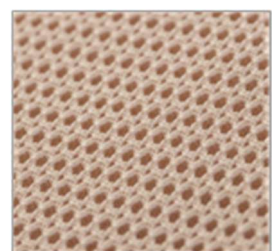


- Tkanina o przestrzennej strukturze plastra miodu.

NFZ: J.01.01 Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera) – dla dorosłych

Dostępne rozmiary, wersja lewa i prawa

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód nadgarstka (cm)	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25
Ref.	SRT226M1	SRT226M2	SRT226M3	SRT226M4	SRT226M5

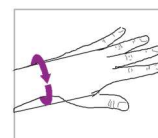

Po podaniu numeru **Ref.** należy dodać wersję – **L lewa, P prawa**.

Mierzmy obwód nadgarstka.