

AEROTEC MANU

Orteza unieruchamiająca nadgarstek

Ref. SRT 227

Zalecenia

Zaleca się stosowanie ortezy po skręceniach, przy niestabilności, w zespole cieśni nadgarstka, przy porażeniu nerwu promieniowego, w zapaleniu pochewek ścięgnistych, w doleczaniu po złamaniach okolic nadgarstka, jako wsparcie procesu leczenia ortopedycznego i rehabilitacji.

Opis

Otwarty tutor, wykonany z przewiewnego materiału, zawiera:

- jedną metalową, profilowaną anatomicznie szynę dłoniową (możliwe ręczne korygowanie).
- 2 tworzywowe stalki w części grzbietowej. Zapięcie i regulacja na velcro po stronie grzbietowej.

Długość ortezy 24 cm.

Orteza stabilizuje i uniemożliwia zgięcie dłoniowe i grzbietowe w stawie promieniowo-nadgarstkowym.

Materiały konstrukcyjne


Orteza wykonana jest z trzywarstwowego laminowanego materiału:

- **Spaziato** – to przestrzenna siatka 3D o charakterystycznym kształcie, takim jak struktura plastra miodu z poliestrową nicią. Dzięki takiemu rozwiązaniu materiał zapewnia przepuszczalność w obu kierunkach dla ciepła i wilgoci.
- **Moltopren (MTP)** - to otwartokomórkowy materiał piankowy, przepuszczający powietrze w obu kierunkach, (przepuszczalność jest odwrotnie proporcjonalna do gęstości) o wysokich właściwościach absorpcyjnych wilgoci
- **Jersey cottone SOFT** – warstwa wykonana w 100% z bawełny lub bawełny ze spandexem – elastanem (dla zwiększenia elastyczności).


SOFT - nazwa wersji wykonanej z materiału oferującego właściwości ochronne dla skóry, która gwarantuje delikatność w kontakcie z ciałem i zapobiega powstawaniu podrażnień skóry.

Właściwości tkaniny

Trójwarstwowa tkanina laminowana zachowuje się jak regulator wilgotności: bawełniana warstwa pochłania wilgoć z powierzchni ciała i przenosi ją w głąb tkaniny i przez piankę PU na zewnątrz.

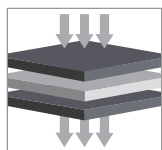

Przepuszczalny dla powietrza

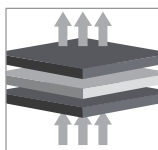

Przepuszczalny dla wilgoci

NFZ: J.02.01 Orteza na rękę i przedramię

Dostępne rozmiary, wersja lewa i prawa

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód nadgarstka (cm)	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25
Ref.	SRT227M1	SRT227M2	SRT227M3	SRT227M4	SRT227M5

Po podaniu numeru Ref. należy dodać wersję – **L** lewa, **P** prawa.


Mierzmy obwód nadgarstka.



- Zapięcie i regulacja na velcro



- Metalowa szyna dłoniowa profilowana anatomicznie (możliwe ręczne korygowanie).

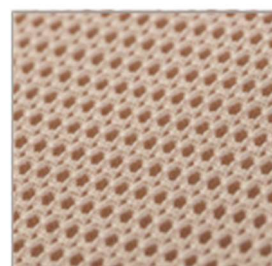

- Tkanina 3D o przestrzennej strukturze plastra miodu.

