

TRIAFIX MANU

Orteza unieruchamiająca nadgarstek

Ref. SRT 229

Zalecenia

Produkt zalecany w przypadku skręceń, niestabilności nadgarstka, zmian zwyrodnieniowych, zespołu cieśni nadgarstka, w porażeniach nerwu promieniowego, w zapaleniach pochewek ścięgniętych, po zdjęciu opatrunku gipsowego po złamaniach, w stanach po zabiegach operacyjnych i w procesie rehabilitacji.

Opis

Otwarty tutor wykonano ze sztywnego i przepuszczalnego dla ciepła i wilgoci materiału. Wyposażony w:

- jedną metalową, profilowaną anatomicznie szynę dłoniową (możliwe ręczne korygowanie kształtu).
- 2 tworzywowe sztywniki wszyte po stronie grzbietowej.

Po stronie grzbietowej znajduje się również system zapięcia i regulacji (3 przeciągane przez szlufki, taśmy dociągowe zapinane na velcro).

Długość ortezy: 22 cm.

W celu łatwiejszego zakładania, dopasowania 2 przedramienne taśmy dociągowe połączone są w jedną (kształt "V"). Metalowa szyna jest umieszczona w kieszonce zapinanej na velcro i w razie konieczności może być wyjęta z ortezy. Stabilizator unieruchamia i ogranicza zgięcie grzbietowe i dłoniowe dłoni.


Materiały konstrukcyjne

Tutor ortezy jest wykonany z dwóch warstw laminowanego, przewiewnego materiału.


- **X-one** – to przestrzenna siatka 3D o specyficznej strukturze plastra miodu, tkana z nitki poliestrowej i zapewnia przepuszczalność powietrza w obu kierunkach.
- **Velutino** – to materiał wykonany z włókien poliamidowych, które mają wysoki opór wchłaniania substancji chemicznych i biologicznych, wysoką odporność na ścieranie oraz brak właściwości do absorpcji wody.

Właściwości tkaniny

Laminowana tkanina zachowuje się jak regulator wilgotności: pochłania wilgoć z powierzchni ciała, przenosząc ją z tkaniny 3D do górnej warstwy wykonanej z poliamidu i dalej na zewnątrz. Specyficzne sieciowanie siatki zapewnia szybki transfer ciepła i wilgoci.

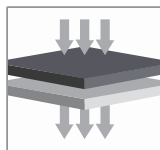

Przepuszczalny dla powietrza

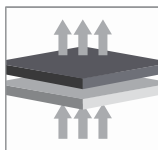

Przepuszczalny dla wilgoci



- Zapięcie i regulacja na velcro

- Precyzyjne dopięcie - taśmy przedramienne „V”.




- Metalowa szyna dłoniowa, profilowana anatomicznie (możliwe ręczne korygowanie).

NFZ: J.02.01 Orteza na rękę i przedramię

Dostępne rozmiary, wersja lewa i prawa.

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód nadgarstka (cm)	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25
Ref.	SRT229M1	SRT229M2	SRT229M3	SRT229M4	SRT229M5

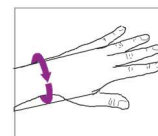

Po podaniu numeru **Ref.** należy dodać wersję – **L lewa, R prawa**.

Mierzmy obwód nadgarstka.