

TRIAFIX ARM 02

Stabilizator kończyny górnej

Ref. SRT 235

Zalecenia

Zaleca się stosowanie produktu w podwichnięciach w stawie barkowym, stłuczeniach, skręceniach, przeciążeniach i stanach zapalnych w obrębie obręczy barkowej, w sytuacji konieczności podwieszenia kończyny górnej.

Opis

Hamak ortezy jest wykonany z jednego kawałka materiału i posiada dwie regulowane na długość taśmy oraz jedną dodatkową do ujęcia kciuka. Taśmy stabilizacyjne mogą być regulowane na długość poprzez przycięcie, ponieważ końcówki velcro mogą być odczepiane. Regulowana taśma barkowa składa się z:

- jednego zapięcia na podwójną szlufkę w celu regulacji długości paska
- pochewki ochronnej paska

Taśma okołotułowiowa może być stosowana opcjonalnie - całkowicie usunięta, lub użytkowana w sytuacji, gdy konieczne jest odciążenie kończyny ze stabilizacją w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej.

Materiały konstrukcyjne


W konstrukcji wykorzystano trzywarstwowy, laminowany materiał:

- **Velutino** – to materiał wykonany z włókien poliamidowych, które mają wysoki opór wchłaniania substancji chemicznych i biologicznych, wysoką odporność na ścieranie oraz brak właściwości do absorpcji wody.
- **Moltopren (MTP)** – to otwartokomórkowy materiał piankowy, przepuszczający powietrze w obu kierunkach, (przepuszczalność jest odwrotnie proporcjonalna do gęstości) o wysokich właściwościach absorpcyjnych wilgoci
- **Jersey cotone SOFT** – to 100% bawełniany lub bawełna ze spandexem – elastanem (dla zwiększenia elastyczności)


SOFT - nazwa wersji wykonanej z materiału oferującego właściwości balsamiczne, które gwarantują delikatność w kontakcie z ciałem i zapobiegają powstawaniu podrażnień skóry.

Właściwości tkaniny

Trójwarstwowa tkanina laminowana zachowuje się jak regulator wilgotności: bawełniana warstwa pochłania wilgoć z powierzchni ciała, przenosi ją w głąb tkaniny i dalej na zewnątrz.

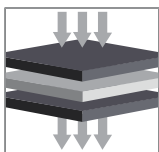

Przepuszczalny dla powietrza

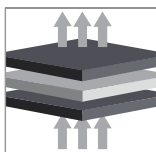

Przepuszczalny dla wilgoci



- Wyposażony w 2 regulowane taśmy stabilizacyjne.



- Dodatkowa możliwość regulacji długości taśm przez odcięcie nadmiaru.

NFZ: J.06.01 Orteza na ramię i bark typu Dessault

Dostępne rozmiary

Produktu uniwersalny.