

HALLUFIX

Korektor palucha koślawego

Ref. SRT 301

Zalecenia

Zaleca się stosowanie korektora do korygowania koślawości palucha, również do stabilizacji po zabiegach operacyjnych. Produkt należy zakładać na noc.

Opis

Korektor wykonano z przewiewnego materiału i zawiera metalową, plastyczną szynę zaprojektowaną do fizjologicznej korekcji palucha koślawego, zapięcie na velcro.


Materiały konstrukcyjne

Produkt jest wykonany z trzywarstwowego laminowanego materiału:


- **Velutino** – to materiał wykonany z włókien poliamidowych, które mają wysoki opór wchłaniania substancji chemicznych i biologicznych, wysoką odporność na ścieranie oraz brak właściwości do absorpcji wody
 - **Moltopren (MTP)** – to otwartokomórkowy materiał piankowy, przepuszczający powietrze w obu kierunkach, (przepuszczalność jest odwrotnie proporcjonalna do gęstości) o wysokich właściwościach absorpcyjnych wilgoci
 - **Jersey cottone SOFT** – to 100% bawełniany lub bawełna ze spandexem – elastanem (dla zwiększenia elastyczności).
- SOFT** - nazwa wersji wykonanej z materiału oferującego właściwości balsamiczne, które gwarantują delikatność w kontakcie z ciałem i zapobiegają powstawaniu podrażnień skóry.

Właściwości tkaniny

Trójwarstwowa tkanina laminowana zachowuje się jak regulator wilgotności: bawełniana warstwa pochłania wilgoć z powierzchni ciała i przenosi go w głąb tkaniny i przez piankę PU na zewnątrz.

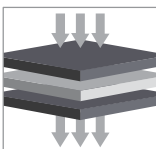

Przepuszczalny dla powietrza

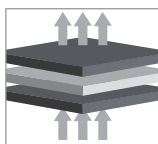

Przepuszczalny dla wilgoci



- Zapięcie na velcro.



- Metalowa, plastyczna szynę zaprojektowaną do fizjologicznej korekcji palucha koślawego.



- Szyna – możliwe ręczne korygowanie profilu.

Dostępne rozmiary, wersja lewa prawa.

Wersja	Lewy	Prawy
Ref.	SRT301L	SRT301R

Rozmiar uniwersalny